



Paragard®

intrauterine copper contraceptive

simple, honest
pregnancy prevention™



تنظيم النسل
بدون
هرمونات
بنسبة إيجابية
100%
وبلا أي
استثناءات



Paragard هو لولب نحاسي صغير يمكنه منع الحمل لفترة طويلة تصل إلى 10 أعوام. إنه يعمل بطريقة مختلفة من خلال مكون واحد بسيط وفعال وهو -النحاس- بدلاً من الهرمونات. لقد ارتبطت اللولب الرحمية، بما فيها Paragard، بارتفاع خطر الإصابة بالأمراض الحوضية الالتهابية (PID). لا تستخدم Paragard إذا كنتِ تعانيين من عدوى بالحوض، أو أنواع معينة من السرطانات، أو تحسّس من النحاس، أو داء ويلسون، أو الأمراض الحوضية الالتهابية (PID). يُرجى الاطلاع على المعلومات المهمة المتعلقة بالأمان في هذا الكتيب وفي نشرة معلومات الوصفة الطبية الكاملة المرفقة في العبوة.

Paragard هو لولب رحمي صغير خالي من الهرمونات بنسبة 100%، والذي يستخدم مكوّن أ فقط بسيط وفَعّال يمكنه منع الحمل بنسبة تتجاوز 99% في الحال.

يوضع في رحمك على يد مقدم الرعاية الطبية في بض دقائق أثناء زيارتك له في العيادة بشكل طبيعي. وبمجرد وضعه في مكانه الصحيح، فإنه يوفر لك الوقاية المستمرة من الحمل لفترة قصيرة أو طويلة كما تريدين—ولفترة تصل إلى 10 أعوام.

Paragard صُنِعَ بشكل أساسي من مادة بلاستيكية ناعمة ومزّنة ملفوفة بطبقة رقيقة من النحاس حول الذراعين والساق.



لأنه خالي من الهرمونات بنسبة إيجابية 100% وبلا أي استثناءات



فَعّال بنسبة تتجاوز 99%



إنه يعمل بطريقة مختلفة من خلال مكوّن 1 فقط بسيط وفَعّال وهو—النحاس



بدون هرمونات، وبدون الآثار الجانبية للهرمونات



بدون متاعب ومنخفض المتطلبات —لا حبوب يومية، أو ترتيبات شهرية، أو أساليب روتينية لتنظيم النسل



يستمر لفترة تصل إلى 10 أعوام لكن يمكن إزالته في أي وقت حال رغبت في الحمل*



توضع سريع وبدون جراحة أثناء زيارتك الطبيعية لعيادة الطبيب فقط في بض دقائق



وسيلة منع الحمل الرحمية الوحيدة الحاصلة على اعتماد إدارة الغذاء والدواء لأكثر من 30 عامًا



يمكن لغالبية النساء اللائي يتمتعن بتأمين الحصول على Paragard بدون رسوم†

IUS (اللولب الرحمية) IUD (الوسائل الرحمية لمنع الحمل)

*يجب نزعها على يد مقدم الرعاية الصحية.

†راجعى شركة التأمين الخاصة بك للتأكد من التغطية المتعلقة بخطتك الفردية. قد تُطبق رسوم من أجل إجراء توضع لولب Paragard.

معلومات مهمة متعلقة بالأمان

• إذا لم تأتِكِ الدورة الشهرية في موعدها، أو إذا عانيت من ألم دائم في منطقة البطن، أو إذا خرج Paragard من موضعه، أخبري مقدم الرعاية الصحية (HCP). وحال خروجه عن موضعه، استخدمى وسيلة احتياطية لتنظيم النسل.

يرجى الاطلاع على معلومات مهمة متعلقة بالأمان في هذا الكتيب وفي نشرة معلومات الوصفة الطبية الكاملة المرفقة في العبوة.



Paragard®

intrauterine copper contraceptive

simple, honest pregnancy prevention™

كيف يعمل Paragard؟




يعمل Paragard بطريقة مختلفة من خلال مكون 1 بسيط وفعال وهو—النحاس—بدلاً من الهرمونات.



يعمل Paragard عن طريق منع الحيوانات المنوية من الوصول إلى البويضة وتخصيها، كما يمكنه منع انغراسها.



ونظرًا لأن Paragard خالي من الهرمونات بنسبة 100%، فإنه لن يمنع دورة الحيض الطبيعية* أو يوقف الإباضة الشهرية.

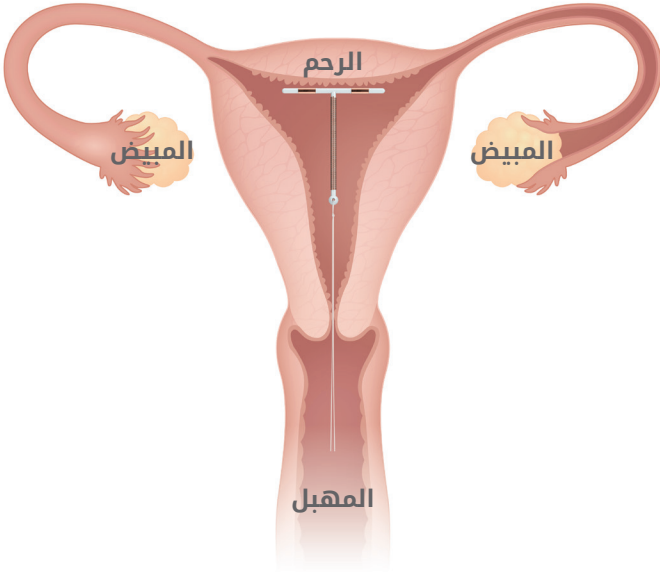

هل تعلمين؟

إن Paragard هو وسيلة منع الحمل الرحمية النحاسية الحاصلة على اعتماد إدارة الغذاء والدواء والمثبت سلامتها وفعاليتها سريريًا لأكثر من 30 عامًا.

*قد تزداد غزارة الدورات الشهرية وتزداد مدتها مع إمكانية حدوث تقيع (بقع دموية) بينها. قد يصبح النزف أكثر غزارة عن المعتاد في البداية.

معلومات مهمة متعلقة بالأمان
• قد يتعلق Paragard بالرحم أو يمر من خلاله مسببًا مشكلات أخرى.

يرجى الاطلاع على معلومات مهمة متعلقة بالأمان في هذا الكتيب وفي نشرة معلومات الوصفة الطبية الكاملة المرفقة في العبوة.

 **Paragard®**
intrauterine copper contraceptive

simple, honest
pregnancy prevention™

ما الذي تتوقعينه مع Paragard

مع Paragard، لا توجد...

0

التزامات
يومية
أو ترتيبات
شهرية



1

فحص
الخط
شهرياً

يمكنك فعل
ذلك بنفسك



2

مواعيد الزيارات

- واحدة للتوضيع
- وأخرى بعد شهر
- تقريباً من توضيعه
- للتأكد من أن
- Paragard في
- موضعه الصحيح*



توضيع Paragard لا يتطلب جراحة ويجري على يد مقدم الرعاية الطبية فقط في بضع دقائق أثناء زيارتك له في العيادة بشكل طبيعي. جميعنا مختلفون، لذلك قد تشعر بعض النساء بعدم الراحة خلال أو بعد الإدخال. بمجرد إدخال Paragard، قد تشعرين بتشنجات أو وخز، وتصاب بعض النساء بالإغماء، أو تشعر بالغثيان، أو بالدوار لدقائق قليلة بعد إدخاله.

بعد التوضيع

بمجرد توضيعه في مكانه الصحيح، من المفترض أنك لن تشعرين بـ Paragard. يمكنك الاستمرار في استخدام الإسفنج الرحمي ومن المفترض أنك لن تشعرين به أنت أو زوجك أثناء ممارسة العلاقة الحميمة.

في البداية، قد تزداد غزارة الدورات الشهرية وتزداد مدتها مع إمكانية حدوث تبقيع (بقع دموية) بينها، وغالباً ما يقل هذا مع مرور الوقت. إذا استمر ذلك، اتصلي بمقدم الرعاية الصحية.

المتابعة

قومي بزيارة مقدم الرعاية الصحية للفحص الروتيني بعد شهر تقريباً من توضيع Paragard للتأكد من أنه في موضعه الصحيح*.

إنه لشيء جيد أن تتحقي من وجود Paragard في الرحم بشكل صحيح من خلال الفحص الذاتي الشهري للخيوط. بعد غسل الأيدي بالماء والصابون، حاولي الوصول إلى قمة المهبل بأصابع نظيفة حتى تستشعري وجود الخيطين.

*بناءً على ما تشعرين به، قد يكون من اللازم ترتيب مواعيد زيارات إضافية للتأكد أن Paragard في موضعه الصحيح.

معلومات مهمة متعلقة بالأمان
• حدوث الحمل أثناء استخدام Paragard أمرٌ نادر لكنه قد يكون خطراً على الحياة وقد يسبب العقم أو فقدان الحمل.

يرجى الاطلاع على معلومات مهمة متعلقة بالأمان
في هذا الكتيب وفي نشرة معلومات الوصفة الطبية
الكاملة المرفقة في العبوة.

 **Paragard®**
intrauterine copper contraceptive


simple, honest
pregnancy prevention™

كيف يمكن مقارنة Paragard؟

هل Paragard مناسب لك؟

Paragard فعال بنسبة تتجاوز 99%—أحد أكثر الوسائل المتاحة فعالية لتنظيم النسل

إذا كانت إجابتك بـ "نعم" لأي من هذه العبارات، تحدثي إلي مقدم الرعاية الصحية عمّا إذا كان Paragard مناسبًا لك أم لا.

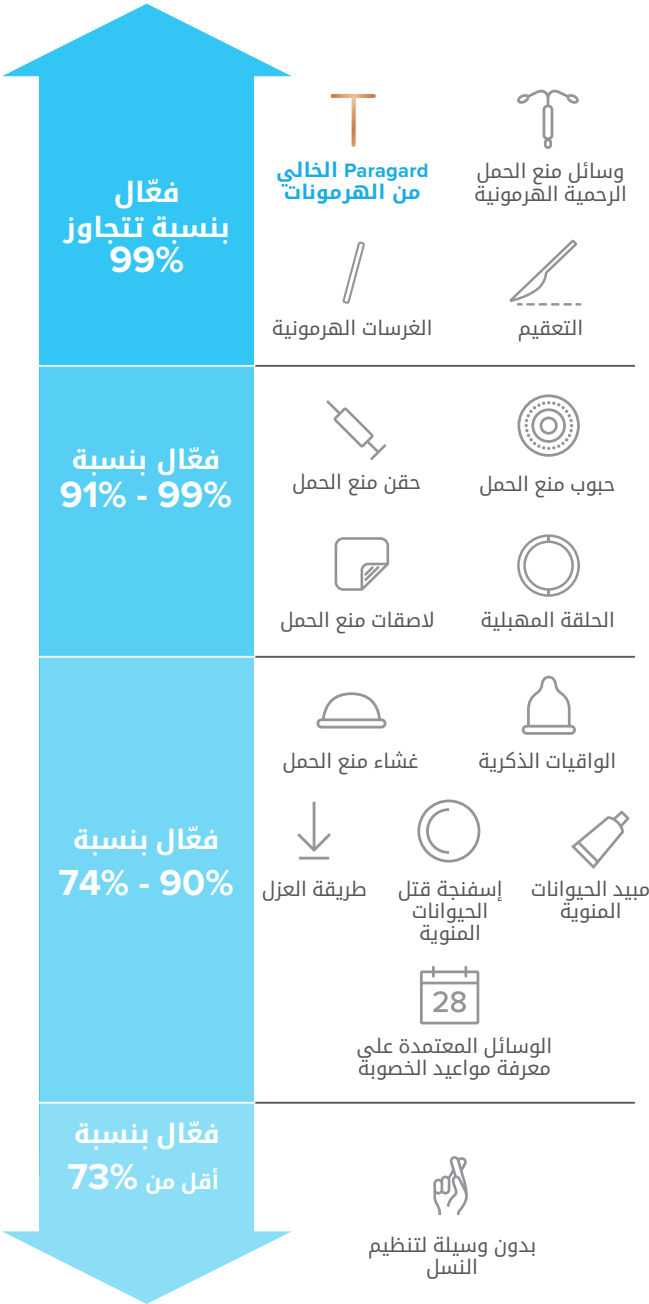

1. أنا مهتمة بوسائل تنظيم النسل **الخالية من الهرمونات بنسبة 100%**

☐ أتفق ☐ لا أتفق

2. أرغب في وسيلة منع حمل **فعّالة بدرجة كبيرة**

☐ أتفق ☐ لا أتفق

3. لقد عانيت من **آثار جانبية سلبية** إثر استخدام وسائل تنظيم الحمل الهرمونية في الماضي

☐ أتفق ☐ لا أتفق

4. أود أن أعطي جسمي **فترة راحة من وسائل منع الحمل الهرمونية** لأنني استخدمتها لمدة أعوام عديدة

☐ أتفق ☐ لا أتفق

5. أريد وسيلة منع حمل **مريحة** ولا تتطلب روتين يومي

☐ أتفق ☐ لا أتفق

6. أريد وسيلة منع حمل **تستمر لأطول الفترات لكن يمكن الرجوع عنها** إذا غيرت رأيي

☐ أتفق ☐ لا أتفق

Trussell J. Contraceptive failure in the United States. *Contraception*. 2011;83:397-404

معلومات مهمة متعلقة بالأمان
• قد تزداد غزارة الدورات الشهرية وتزداد مدتها مع إمكانية حدوث تقيع (بقع دموية) بينها. قد يصبح النزف أكثر غزارة عن المعتاد في البداية.

يرجى الاطلاع على المعلومات المهمة المتعلقة بالأمان في هذا الكتيب وفي نشرة معلومات الوصفة الطبية الكاملة المرفقة في العبوة.

Paragard®
intrauterine copper contraceptive
simple, honest
pregnancy prevention™

التكلفة والتغطية التأمينية



يمكن لغالبية النساء اللائي
يتمتعن بتأمين الحصول على
Paragard بدون تكلفة

Paragard يتمتع بتغطية كاملة في معظم
الخطط التأمينية—مما يعني عدم وجود
سدادات تشاركية، أو مخصصات، أو تكاليف
عينية يتحملها المريض.*

يمكنك الاستعلام عن تغطيتك التأمينية لـ
Paragard من خلال طريقتين:

1 اتصلي بشركة التأمين مباشرة

أو

2 احصلي على تقرير لتوثيقSM مميزات Paragard مجاناً

1. اتصلي برقم خدمة العملاء الموجود في
الجهة الخلفية من بطاقة التأمين
2. واخبرهم أن مقدم الرعاية الصحية قد
وصف لك Paragard كوسيلة لتنظيم النسل
3. واسألهم أن يتحققوا إن كان Paragard
مشمولاً في التغطية بموجب قانون الرعاية
الميسورة
4. أخبرهم بكود J الخاص بـ Paragard: **J7300**
5. اسألهم عما إذا كانت هناك تكاليف عينية
يتحملها المريض، أو إذا كان Paragard
مشمولاً بشكل جزئي فقط بموجب خطتك

من خلال الهاتف:

1. اتصلي بـ **1-877-PARAGARD**

2. سيساعدك أخصائيو توثيق المميزات في تأكيد
التغطية المتعلقة بخطتك الفردية

عبر الإنترنت:

1. قومي بزيارة **Paragardbvsp.com**

2. أكملّي استمارة توثيق المريض الإلكترونية
وأرسلها

3. اطلبي من مقدم الرعاية الصحية إرسال استمارة
إحالة مريض

• بمجرد استلام الاستمارتين، ستستلمين
تقرير مُفصّل يبين تغطيتك التأمينية لـ
Paragard

• إذا كانت لديك أي أسئلة أو احتجت إلى
المساعدة أثناء هذه العملية، اتصلي بـ

1-877-PARAGARD

*راجعى شركة التأمين للتأكد من التغطية المتعلقة بخطتك الفردية. قد
تطبق رسوم من أجل إجراء توضع Paragard.

يُرجى الاطلاع على معلومات مهمة متعلقة بالأمان في
هذا الكتيب وفي نشرة معلومات الوصفة الطبية الكاملة
المرفقة في العبوة.

 **Paragard®**
intrauterine copper contraceptive

simple, honest
pregnancy prevention™



Paragard®
intrauterine copper contraceptive

simple,
honest
pregnancy
prevention™

هل تريدین وسیلة منع حمل خالية
من الهرمونات؟
اسألني عن Paragard.

خالی من
الهرمونات بنسبة

100%

فعّال بنسبة تتجاوز

99%

مكوّن 1

بسيط وفعّال

قومي بزيارة Paragard.com
أو اتصلي على 1-877-PARAGARD



لا يوفر Paragard حماية ضد فيروس نقص المناعة المكتسبة
أو الأمراض المنقولة جنسياً.

فقط أنت ومقدم الرعاية الصحية (HCP) من يمكنهما تقرير إذا
ما كان Paragard مناسباً لك أم لا. متاح من خلال وصفة طبية
فقط.

نشجعك على الإبلاغ عن الآثار الجانبية السلبية للأدوية
المُغطاة بوصفة طبية لإدارة الغذاء والدواء من خلال الرابط

www.fda.gov/medwatch

أو الاتصال على 1-800-FDA-1088.

يرجى الاطلاع على معلومات مهمة متعلقة بالأمان في هذا
الكتيب وفي نشرة معلومات الوصفة الطبية الكاملة المُرفقة
في العبوة.

Paragard علامة تجارية مسجلة لشركة CooperSurgical, Inc.

© CooperSurgical 2019 US-PAR-2000005 نوفمبر 2019



PATIENT INFORMATION

Paragard® ('par-uh-gahrd)
(intrauterine copper contraceptive)


Paragard does not protect against HIV infection (AIDS) or other sexually transmitted infections (STIs).

Read this Patient Information carefully before you decide if Paragard is right for you. This information does not take the place of talking with your gynecologist or other healthcare provider who specializes in women's health. If you have any questions about Paragard, ask your healthcare provider. You should also learn about other birth control methods to choose the one that is best for you.

What is Paragard?

- Paragard is a copper-releasing system that is placed in your uterus by your healthcare provider to prevent pregnancy for up to 10 years.
- Paragard can be removed by your healthcare provider at any time.
- Paragard does not contain any hormones.
- Paragard can be used whether or not you have given birth to a child.

Paragard is a small, flexible plastic "T" shaped intrauterine system with copper wrapped around the stem and placed on arms of the "T". Two thin white threads are attached to the stem (lower end) of Paragard. The threads are the only part of Paragard you can feel when Paragard is in your uterus; however, unlike a tampon string, the threads do not extend outside of your body.

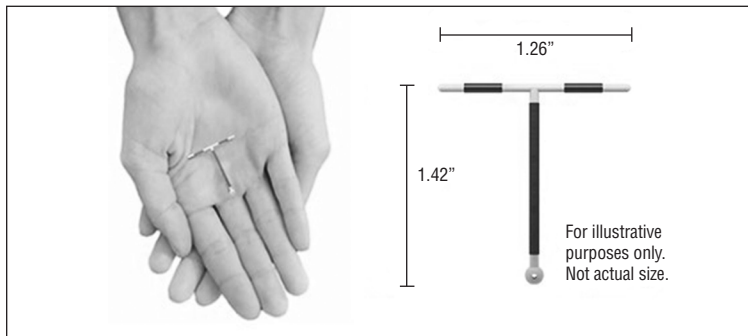

What if I need birth control for more than 10 years?

Paragard must be removed on or before 10 years from the date of insertion. Your healthcare provider can place a new Paragard during the same office visit if you choose to continue using Paragard.

What if I want to stop using Paragard?

Paragard is intended for use up to 10 years, but you can stop using Paragard at any time by asking your healthcare provider to remove it. You could become pregnant as soon as Paragard is removed; however, if you do not want to become pregnant you should use another method of birth control. Talk to your healthcare provider about the best birth control methods for you.

What if I change my mind about birth control and want to become pregnant in less than 10 years?

Your healthcare provider can remove Paragard at any time before the 10 years after placement. You may become pregnant as soon as Paragard is removed.

How does Paragard work?


Paragard works by preventing sperm from reaching the egg, preventing sperm from fertilizing the egg, or possibly preventing attachment (implantation) in the uterus. Paragard does not stop your ovaries from making an egg (ovulating) each month.

How well does Paragard work for contraception?

The following chart shows the chance of getting pregnant for women who use different methods of birth control. Each box on the chart contains a list of birth control methods that are similar in effectiveness.

The most effective methods are at the top of the chart. The box on the bottom of the chart shows the chance of getting pregnant for women who do not use birth control and are trying to get pregnant.

Paragard, an intrauterine system (IUS), is in the box at the top of the chart.

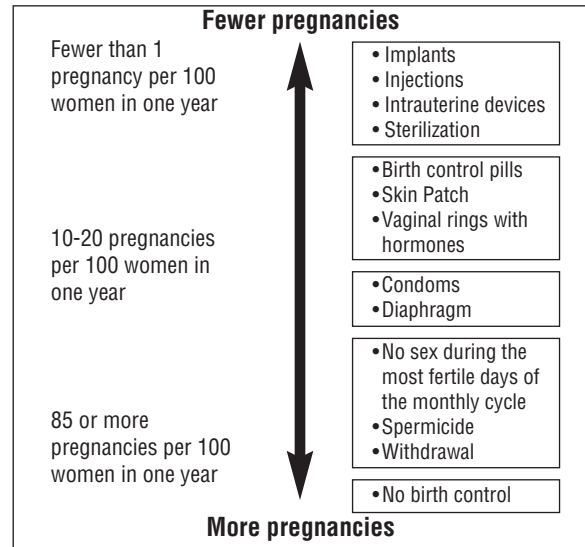

Who might use Paragard?

You might choose Paragard if you:

- want long-term birth control that provides a low chance of getting pregnant (less than 1 in 100)
- want birth control that works continuously for up to 10 years
- want birth control that is reversible
- want a birth control method that you do not need to take daily
- are willing to use a birth control method that is inserted in the uterus
- want birth control that does not contain hormones

Do not use Paragard if you:

- are or might be pregnant
- have a condition of the uterus that changes the shape of the uterine cavity, such as large fibroid tumors
- have an untreated pelvic infection called pelvic inflammatory disease (PID) now
- have had an infection in your uterus after a pregnancy or abortion in the past 3 months
- can get infections easily. For example, if you:
 - have problems with your immune system
 - have multiple sexual partners or your partner has multiple sexual partners
 - use or abuse intravenous drugs
- have or suspect you might have cancer of the uterus or cervix
- have unexplained bleeding from your vagina
- have an untreated lower genital infection now in your cervix
- have Wilson's disease (a disorder in how the body handles copper)
- are allergic to copper, polyethylene, or barium sulfate
- have an intrauterine system in your uterus already

Before having Paragard placed, tell your healthcare provider if you have:


- any of the conditions listed above
- slow heart beat (bradycardia)
- dizziness (syncope)
- seizures
- recently had a baby or if you are breastfeeding
- have AIDS, HIV, or any other sexually transmitted infection

How is Paragard placed?

Paragard is placed in your uterus during an in-office visit.


First, your healthcare provider will examine your pelvis to find the exact position of your uterus. Your healthcare provider will then cleanse your vagina and cervix with an antiseptic solution and then, measure your uterus. Your healthcare provider will then slide a plastic tube containing

Paragard into your uterus. The tube is removed, leaving Paragard inside your uterus. Two white threads will extend into your vagina. The threads are trimmed so they are just long enough for you to feel with your fingers when doing a self-check. As Paragard goes in, you may feel cramping or pinching. You may have some bleeding. Some women feel faint, nauseated, or dizzy for a few minutes afterwards. Your healthcare provider may ask you to lie down until you are feeling better, and to get up slowly.

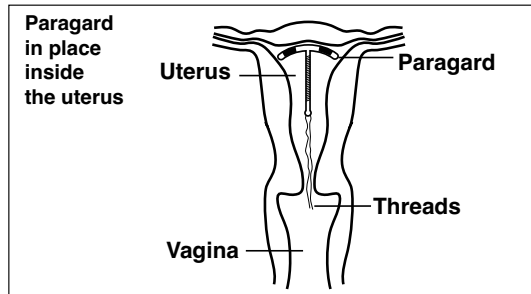

Should I check that Paragard is in place?

Yes, you should check that Paragard is in proper position by feeling the threads. It is a good habit to do this 1 time a month. Your healthcare provider should teach you how to check that Paragard is in place. First, wash your hands with soap and water. You can check by reaching up to the top of your vagina with clean fingers to feel the 2 threads. Do not pull on the threads.

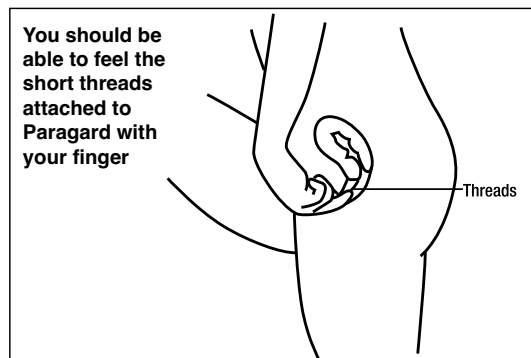

If you feel changes in the length of the 2 threads, you cannot feel the threads, or you can feel any other part of Paragard other than the threads, Paragard may not be in the right position and may not prevent pregnancy. Use back-up birth control (such as condoms or spermicide) and ask your healthcare provider to check that Paragard is still in the right place.

If Paragard is accidentally removed, you may be at risk of pregnancy, and should talk to a healthcare provider.

How soon after placement of Paragard should I return to my healthcare provider?

Call your healthcare provider if you have any questions or concerns (see “When should I call my healthcare provider?”). Otherwise you should return to your healthcare provider for a follow-up visit after your first menses after Paragard is placed to make sure that Paragard is in the right position.

What if I become pregnant while using Paragard?

Call your healthcare provider right away if you think you may be pregnant. If you get pregnant while using Paragard, you may have an ectopic pregnancy. This means the pregnancy is not in your uterus. Unusual vaginal bleeding or abdominal pain especially with missed periods may be a sign of ectopic pregnancy.

Ectopic pregnancy is a medical emergency that often requires surgery. Ectopic pregnancy can cause internal bleeding, infertility and even death.

There are also risks if you get pregnant while using Paragard and the pregnancy is in the uterus. Severe infection, miscarriage, premature delivery, and even death can occur with pregnancies that continue with an intrauterine device (IUD). Because of this, your healthcare provider

may try to remove Paragard, even though removing it may cause a miscarriage. If Paragard cannot be removed, talk with your healthcare provider about the benefits and risks of continuing the pregnancy.

If you continue your pregnancy see your healthcare provider regularly. Call your healthcare provider right away if you get flu-like symptoms, fever, chills, cramping, pain, bleeding, vaginal discharge, or fluid leaking from your vagina. These may be signs of infection.

It is not known if Paragard can cause long-term effects on the fetus if it stays in place during a pregnancy.

How will Paragard change my periods?

Your period may become heavier and longer. You may also have frequent spotting between periods.

Is it safe to breastfeed while using Paragard?

You may use Paragard when you are breastfeeding. The risk of Paragard becoming attached to (embedded) or going through the wall of the uterus is increased if Paragard is placed while you are breastfeeding.

Will Paragard interfere with sexual intercourse?

You and your partner should not feel Paragard during intercourse. Paragard is placed in the uterus, not in the vagina. Sometimes your partner may feel the threads. If this occurs, or if you or your partner experience pain during sex, talk with your healthcare provider.

Can I have an MRI with Paragard in place?

Paragard can be safely scanned with MRI only under specific conditions. Before you have an MRI, tell your healthcare provider that you have Paragard, an intrauterine device (IUD), in place.

Before you have a medical procedure using heat therapy tell your healthcare provider that you have Paragard in place.

What are the possible side effects of Paragard?

Paragard can cause serious side effects, including:

- **ectopic pregnancy and intrauterine pregnancy risks:** There are risks if you become pregnant while using Paragard (see “What if I become pregnant while using Paragard?”).
- **life-threatening infection:** Life-threatening infection can occur within the first few days after Paragard is placed. Call your healthcare provider immediately if you develop severe pain or fever shortly after Paragard is placed.
- **pelvic inflammatory disease (PID) or endometritis:** Some IUS users get a serious pelvic infection called pelvic inflammatory disease (PID) or endometritis. PID and endometritis are usually sexually transmitted. You have a higher chance of getting PID and endometritis if you or your partner has sex with other partners. PID and endometritis can cause serious problems such as infertility, ectopic pregnancy, and pelvic pain that does not go away. PID and endometritis are usually treated with antibiotics. More serious cases of PID or endometritis may require surgery. A hysterectomy (removal of the uterus) is sometimes needed. In rare cases, infections that start as PID can even cause death.

Tell your healthcare provider right away if you have any of these signs of PID or endometritis: low abdominal (stomach area) or pelvic pain, pelvic tenderness, painful sex, unusual or bad smelling vaginal discharge, chills, long-lasting or heavy bleeding, fever, genital lesions or sores.

- **embedding:** Paragard may become attached to (embedded) the wall of the uterus. This may make it hard to remove Paragard. Surgery may sometimes be needed to remove Paragard.
- **perforation:** Paragard may go through the wall of the uterus. This is called perforation. If this occurs, Paragard may no longer prevent pregnancy. If perforation occurs, Paragard may move outside the uterus and cause internal scarring, infection, damage to other organs, pain, or infertility and you may need surgery to have Paragard removed. Excessive pain or vaginal bleeding during placement of Paragard, pain or bleeding that gets worse after placement, or not being able to feel the threads may happen with perforation. You are not protected from pregnancy if Paragard moves outside the wall of the uterus. The risk of perforation is increased in breastfeeding women.

- **expulsion:** Paragard may partially or completely fall out of the uterus by itself. This is called expulsion. Expulsion occurs in about 2 out of 100 women. Excessive pain, vaginal bleeding during placement of Paragard, pain that gets worse, bleeding after placement, or not being able to feel the threads may happen with expulsion. You are not protected from pregnancy if Paragard is expelled.
- **changes in bleeding:** You may have heavier and longer periods with spotting in between. Sometimes the bleeding is heavier than usual at first. Call your healthcare provider if the bleeding remains heavier or longer and spotting continues.
- **reactions after placement or removal:** Some women have had reactions such as dizziness (syncope), slowed heart rate (bradycardia), or seizures, immediately after Paragard was placed or removed. This happened especially in women who have had these conditions before.

Common side effects of Paragard include:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| • anemia (low red blood cell count) | • expulsion (complete or partial) |
| • pain during sex | • spotting |
| • prolonged periods | • painful periods |
| • vaginal irritation | • vaginal discharge |
| • backache | • pain and cramping |

This is not a complete list of possible side effects with Paragard. For more information, ask your healthcare provider. Tell your healthcare provider about any side effect that bothers you or does not go away.

Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

After Paragard has been placed, when should I call my healthcare provider?

Call your healthcare provider if you have any concerns about Paragard. Be sure to call if you:

- think you are pregnant
- have pelvic pain or pain during sex
- have unusual vaginal discharge or genital sores

- have unexplained fever, flu-like symptoms or chills
- might be exposed to sexually transmitted infections (STIs)
- are concerned that Paragard may have been expelled (came out)
- cannot feel Paragard's threads or can feel the threads are much longer
- can feel any other part of the Paragard besides the threads
- become HIV positive or your partner becomes HIV positive
- have severe, bleeding that lasts a long time, or bleeding that concerns you
- miss a menstrual period

General information about the safe and effective use of Paragard.

Medicines are sometimes prescribed for purposes other than those listed in a Patient Information leaflet. You can ask your healthcare provider for information about Paragard that is written for health professionals.

Paragard and its components are not made with natural rubber latex.

Paragard® is a registered trademark of CooperSurgical, Inc. The other brands listed are trademarks of their respective owners.

CooperSurgical

Manufactured by:

CooperSurgical, Inc.
Trumbull, CT 06611

P/N 1016806

For more information, call CooperSurgical, Inc. at 1-877-727-2427.

This Patient Information has been approved by the U.S. Food and Drug Administration

Iss. 12/2019 ECR #2538

US-PAR-1900204 (1)